

BioAqua®



兩星期即棄隱形眼鏡 讓眼睛**舒適、水潤**及**健康**

●高透氧矽水凝膠隱形眼鏡 ●自然親水的物料 ●添加PEG潤滑分子 - 讓鏡片由內到外都保持高度濕潤柔滑



濕潤柔滑



舒適



容易戴除

BioAqua® 兩星期即棄隱形眼鏡

- ✓ 全新的高透氧矽水凝膠隱形眼鏡
- ✓ 自然親水的物料
- ✓ 添加PEG潤滑分子 - 讓鏡片由內到外都保持高度濕潤柔滑

舒適

- 親水性鏡片讓您從早到晚，從佩戴的第一天到第十四天都持續舒適
- 圓邊設計可減少眼瞼和鏡片的摩擦，讓佩戴更舒適



濕潤柔滑

- 添加PEG潤滑分子，讓鏡片更濕潤柔滑，舒緩乾眼症狀



容易戴除

- 試戴兩星期，大部份試戴者認為BioAqua® 容易除戴¹



References:

1. CooperVision. After 2 and 4 weeks of wear, most of the contact lens wearers preferred the handling of fanfilcon A compared to enfilcon A. Data on file.

BioAqua® 兩星期即棄散光隱形眼鏡

優化幾何設計可提供 一致穩定的驗配和清晰的視力

1. 均勻的厚度 (Uniform horizontal ISO thickness)

- 可減少鏡片旋轉，提升鏡片的穩定性，讓視力更清晰

2. 寬闊的稜鏡區域


- 寬闊·連續和相同的稜鏡區域可增加鏡片的穩定性和舒適性

3. 光滑連續的鏡片表面

- 可減少眼瞼和鏡片的摩擦，提升佩戴的舒適性和穩定性


4. 較大的光學區域

- 讓您的視力更清晰

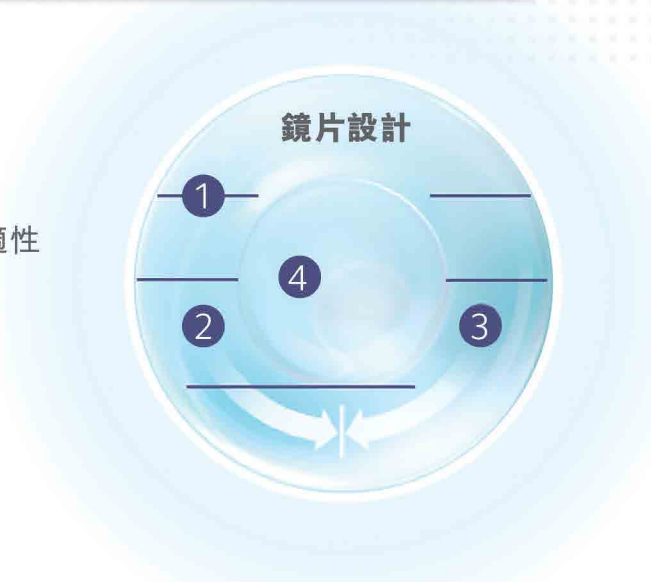

4個隱形眼鏡佩戴者中有3個認為BioAqua® 散光鏡片的整體表現更佳¹

相比O品牌兩星期戴散光鏡片，大部份隱形眼鏡佩戴者認為 BioAqua® 散光鏡片明顯更舒服¹，更濕潤^{1,2}和擁有更佳的視覺質量¹

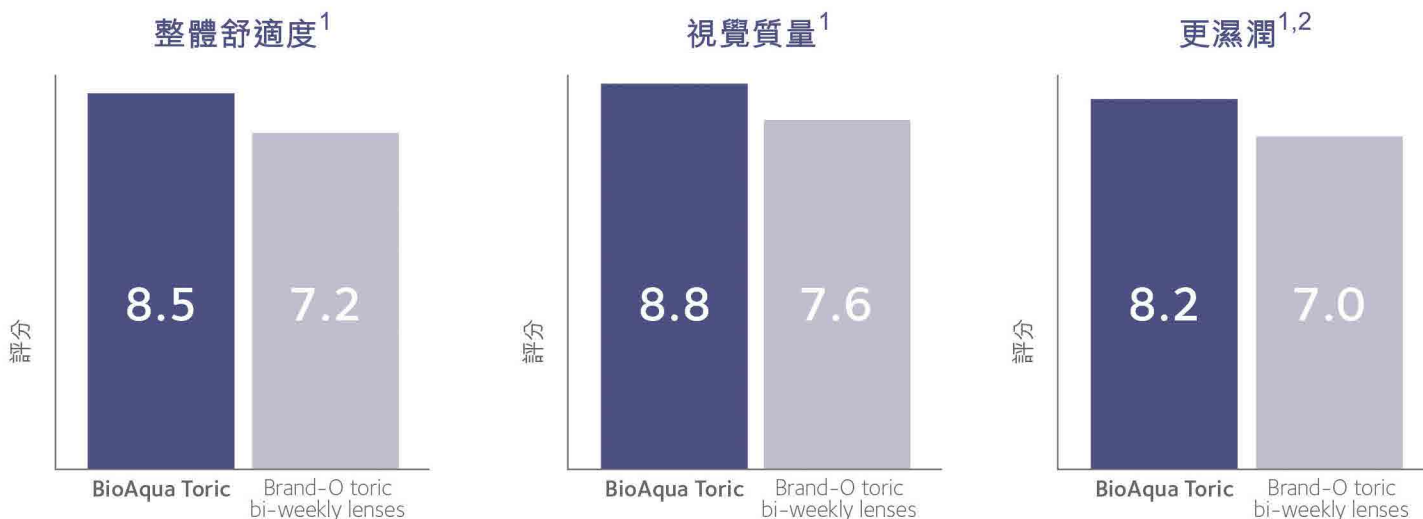

References:

1. Results from a randomized, bilateral, double-masked, 2-week cross-over, 23 subject, daily wear dispensing study comparing BioAqua toric lenses with Brand-O toric bi-weekly lenses. Rating scale (0 to 10).

2. Rating for less end-of-day dryness.

升級高清享受 新兩星期即棄隱形眼鏡

舒適



低模數
讓鏡片更柔軟舒適



圓邊設計
減少眼瞼和鏡片的摩擦
使鏡片佩戴更舒適

健康




高透氧度
讓角膜可自然呼吸
維持角膜的健康



一級防紫外線保護
可阻隔90%UVA和
99% UVB*

更佳的 視覺質量

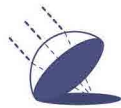

非球面光學設計
減少鏡片和眼睛的球面像差給予您高清視覺

濕潤柔滑



全天候濕潤
親水性物料，讓鏡片
持續平滑舒適



添加PEG
讓鏡片由內到外
都保持高度潤滑



BioAqua For Myopia/Hyperopia (單光)

| | |
|-----|-------------|
| 物料 | fanfilcon A |
| 含水量 | 55% |
| 弧度 | 8.4mm |
| 直徑 | 14.2mm |

| | |
|-------------------|--------|
| 透氧量(Dk/t @-3.00D) | 110 |
| 模數 | 0.6MPa |
| 中心厚度(@-3.00D) | 0.08mm |
| 鏡片顏色 | Blue |
| 配戴模式 | 2-week |

單光度數

| |
|---------------------------------|
| -0.25D to -6.00D (0.25D steps) |
| -6.00D to -12.00D (0.50D steps) |
| +0.25D to +6.00D (0.25D steps) |
| +6.00D to +8.00D (0.50D steps) |



BioAqua For Astigmatism (散光)

| | |
|------|----------------------------------|
| 物料 | fanfilcon A |
| 含水量 | 55% |
| 散光度數 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
| 線位 | From 10° to 180° in 10° steps |
| 弧度 | 8.5mm |

| | |
|-------------------|--------|
| 直徑 | 14.5mm |
| 透氧量(Dk/t @-3.00D) | 90 |
| 模數 | 0.6MPa |
| 中心厚度(@-3.00D) | 0.10mm |
| 鏡片顏色 | Blue |
| 配戴模式 | 2-week |

單光度數

| |
|---------------------------------|
| +0.25D to +6.00D (0.25D steps) |
| +6.00D to +8.00D (0.50D steps) |
| -0.25D to -6.00D (0.25D steps) |
| -6.00D to -10.00D (0.50D steps) |

References:

*Warning: UV-absorbing contact lenses are not substitutes for protective UV-absorbing eyewear, such as UV-absorbing goggles or sunglasses, because they do not completely cover the eye and surrounding area. Patients should continue to use UV-absorbing eyewear as directed.



全球隱形眼鏡領導品牌

CooperVision®是世界上領導隱形眼鏡製造商之一。

CooperVision® 我們的產品遍及全世界一百多個國家。從中國到歐洲，從非洲到美洲，我們改進人們看世界的方式。